




Réglage de la longueur de l'axe QR avant

Assurez-vous qu'il est correctement réglé pour des raisons de sécurité !



1. Desserrez les 2 vis à tête cylindrique et poussez l'axe QR vers le bas à travers la fourche jusqu'à ce que l'écrou de l'axe soit visible.

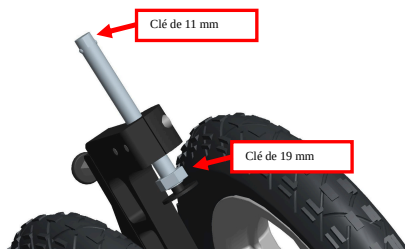

2. Régler la longueur de l'axe QR à l'aide des clés de 11 mm et de 19 mm. Empêcher l'axe QR de tourner en le maintenant à son extrémité avec la clé de 11 mm. Ajuster l'écrou avec la clé de 19 mm. Si l'essieu ne se bloque pas dans le cadre, il suffit de visser l'écrou de $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Serrez à nouveau les 2 vis de la fourche, afin de fixer l'axe QR à la fourche, et essayez d'attacher la suspension avant au cadre. Confirmez qu'elle est complètement verrouillée en place.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service clientèle : +46-8-522 100 50